

Comment utiliser le test individuel COVID-19 d'iHealth

Veuillez lire les instructions ou regarder la vidéo d'instruction sur ihealthlabs.com avant de commencer.

VOUS DEVEZ DISPOSER DES OUTILS SUIVANTS

Écouvillon pour prélèvement d'échantillons



L'écouvillon se trouve à l'intérieur de l'emballage !

Tube à essai avec liquide




iHealth


Carte de test de la COVID-19



PREMIÈRE ÉTAPE : PASSEZ L'ÉCOUVILLON DANS VOTRE NEZ

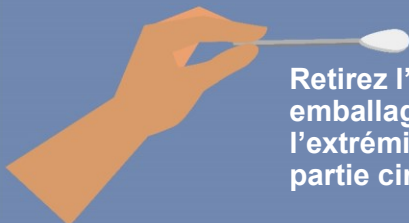

Retirez l'écouvillon de son emballage et tenez-le par l'extrémité opposée à la partie circulaire.

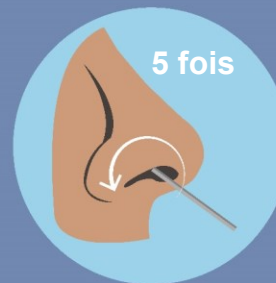

5 fois

Passez l'écouvillon dans votre nez (à environ 1,27 cm de profondeur).

Faites 5 fois le tour de l'intérieur de chaque narine.

DEUXIÈME ÉTAPE : MÉLANGEZ L'ÉCHANTILLON

Retirez le bouchon orange du tube.



Placez l'écouvillon dans le liquide. Remuez-le environ **15 fois**.



Retirez l'écouvillon du liquide tout en pressant le tube. Puis remettez le bouchon orange.




TROISIÈME ÉTAPE : TESTEZ L'ÉCHANTILLON

Retirez le couvercle transparent du bouchon orange.

Déversez **3 gouttes** sur le cercle rond situé sur la carte de test.

Patientez **15 minutes**.

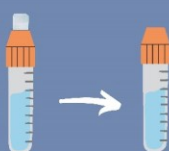

QUATRIÈME ÉTAPE : RÉSULTATS

Deux lignes traduisent un résultat **positif à la COVID**.



*Les lignes peuvent être peu visibles

Une ligne sur le « C » seul traduit un résultat **négatif à la COVID**.



L'absence de ligne ou une ligne sur le « T » indique un test **non valide**.



Pour toute question, consultez le site cv.nmhealth.org/selftest ou appelez la ligne d'assistance consacrée au coronavirus au **1-855-600-3453**

